




EASYGO REHAB STANDARD

En manuel kørestol med en EasyGo Rehab Standard motor sikrer en mere tryk og sikker dagligdag for brugeren og ledsageren.

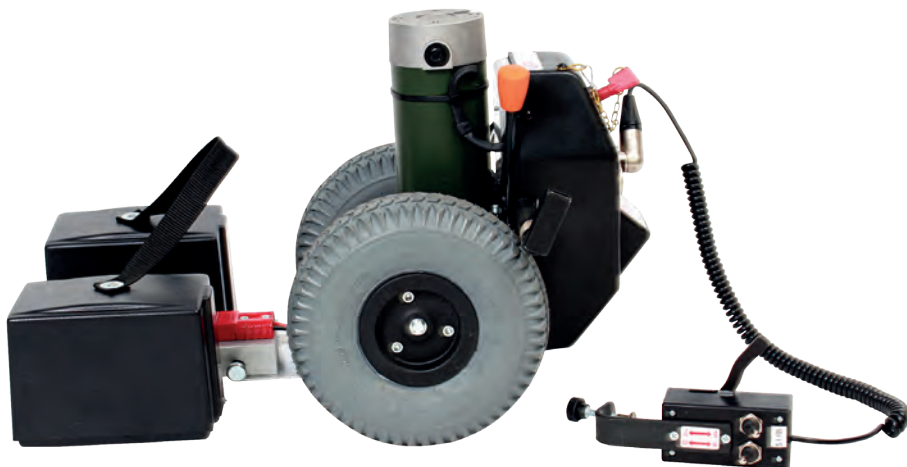

Standard er en ledsagerstyret hjælpemotor til kørestole, der forbedrer arbejdsmiljøet og sikrer trygge forhold.

Ved brug af en EasyGo Rehab Standard-motor mindskes gentagne træk, skub og slæb med manuelle kørestole, der kan føre til en øget risiko for arbejdsskader i skuldrer og ryg, men også en ulykkesrisiko for at blive klemt, påkørt eller falde.

EasyGo Rehab Standard bliver hovedsageligt benyttet til standard transportstole, der kan klappes sammen eller fastramme stole. Motoren kan uden besvær på- og afmonteres uden brug af værktøj.

Dette betyder også, at motoren nemt kan flyttes mellem flere forskellige stole, vha. fastmonterede beslag på stolens ramme. Hjælpemotoren giver øget fleksibilitet og mobilitet til brugeren, mens den aflaster ledsageren.

Motoren styres med en speederboks, som monteres på transportstolens håndtag. Under kørsel følger EasyGo Rehab Standard underlaget, også på brosten, skæve fliser og fast grus. Motoren kan hæves og sænkes fra underlaget, mens den er monteret.

Serien er med punkterfrie dæk, tør batterier og fugtsikret oplader.

EasyGo Rehab Standard # 202001, HMI # 100988

Mål	H: 250 mm, B: 300 mm, L: 520 mm	Motorkraft	150W
Vægt	19 kg	Kørelængde pr. opladning	Op til 12 km
Batterier	12Ah / 20Ah	Hastighed	0 - 4 km/t, 0 - 6 km/t
Lader - ladetid	2,5A - 5 timer	Stigningskapacitet v. 80 kg	7°

IMMO A/S

Friis Hansens Vej 9 - DK-7100 Vejle
+45 7585 8022
hello@immodenmark.dk
immodenmark.dk

IMMO  KEEP MOVING



EASYGO REHAB LIGHT

En manuel kørestol kan være besværlig at manøvrere sikkert og trygt rundt i en travel dagligdag.



EasyGo Rehab Light er en mindre ledsagerstyret hjælpe-motor, der er udviklet til kørestole, hvor pladsen er trang. Den kan benyttes på stole op til 48 cm.

På en styreboks, der er monteret på skubbehåndtaget, kan ledsageren uden besvær starte og slukke motoren, styre retning og regulere hastighed.

Ved at hæve fodpedalen sænkes motoren, hvorefter man er klar til kørsel. Under kørsel følger EasyGo Rehab Light underlag såsom brosten, skæve fliser og fast grus. Motoren øger brugerens

fleksibilitet og mobilitet, og aflaster ledsageren, som slipper for at trække, skubbe og slæbe. Risikoen for arbejdsskader og overbelastning af muskler og led mindskes, men også ulykkesrisici for at blive klemt eller falde.

Motoren er let at på- og afmontere uden brug af værktøj, hvorefter stolen og motoren nemt kan transporteres. Der findes forskellige aftagelige batteripakker, som udvælges efter stolens opbygning. Motoren kan også anvendes til nyere fastrammestole.

Serien er med punkterfrie dæk, tørbatterier og fugtsikret oplader.

EasyGo Rehab Light # 202013, HMI # 35186

Mål	H: 310 mm, B: 300 mm, L: 520 mm	Motorkraft	150 W
Vægt	18,5 kg	Kørelængde pr. opladning	Op til 10 km
Batterier	12Ah	Hastighed	0 - 4 km/t, 0 - 6 km/t
Lader - ladetid	2,5A - 5 timer	Stigningskapacitet v. 80 kg	7°

IMMO A/S

Friis Hansens Vej 9 - DK-7100 Vejle
+45 7585 8022
hello@immodenmark.dk
immodenmark.dk

IMMO  **KEEP MOVING**



EASYGO REHAB PLUS

EasyGo Rehab Plus er en ledsagerstyret hjælpemotor til manuelle XXL kørestole, der er med til at sikre et fysisk sundt arbejdsmiljø for ledsageren.



EasyGo Rehab Plus er en ledsagerstyret hjælpemotor, der sikrer trygge forhold for brede, tunge stole og bariatriske brugere.

EasyGo Rehab Plus er udviklet og produceret til at kunne øge brugerens fleksibilitet, samt forbedre arbejdsmiljøet for ledsageren. Motoren kan tilpasses til mange forskellige fabrikater af stole og påmonteres på kørestole med en sædebredde over 55 cm målt mellem armlænene. Efter montering kan ledsageren ubesværet regulere hastigheden med betjeningsenheden på styrehåndtaget.

Under kørsel trækker motorens egne hjul på underlaget. Vha. differentiale kan EasyGo Rehab Plus dreje skarpt uanset personvægt. Motoren kan med fordel benyttes til bariatriske brugere med en vægt op til 300 kg.

EasyGo Rehab Plus kører på egne hjul, hvilket sikrer et godt greb i underlaget. Under brug bærer hjælpemotoren sin egen vægt, og skal ikke regnes med i kørestolens bæreevne.

Serien er med punkterfrie dæk, tør batterier og fugtsikret oplader.

EasyGo Rehab Plus # 202014, HMI # 36928

Mål	H: 300 mm, B: 500 mm, L: 240 mm	Motorkraft	250 W
Vægt	32 kg	Kørelængde pr. opladning	Op til 10 km
Batterier	20Ah	Hastighed	0 - 6,5 km/t
Lader - ladetid	2,5A - 8 timer	Stigningskapacitet v. 80 kg	7°

IMMO A/S

Friis Hansens Vej 9 - DK-7100 Vejle
+45 7585 8022
hello@immodenmark.dk
immodenmark.dk

IMMO  **KEEP MOVING**