



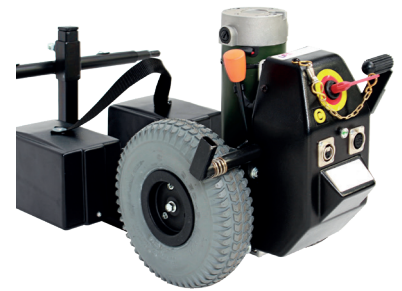

EASYGO REHAB STANDARD

En manuel kørestol med en EasyGo Standard Rehab motor sikrer en mere tryk og sikker dagligdag for brugeren og ledsageren.

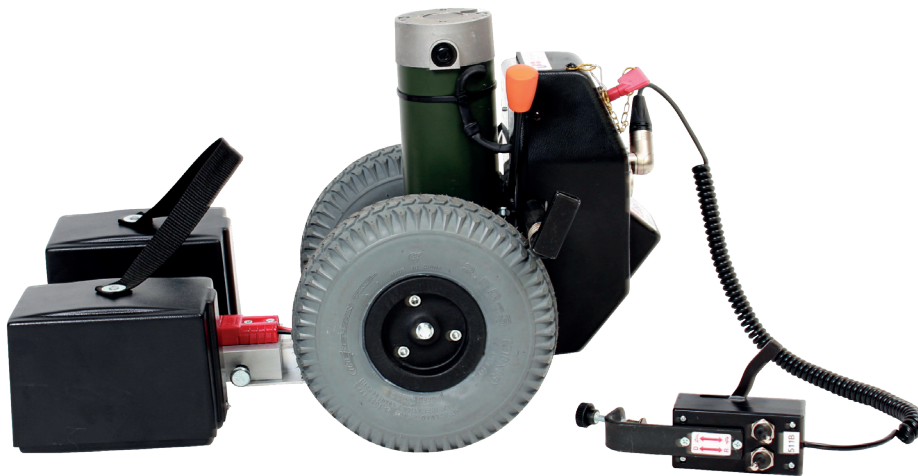

Standard er en ledsagerstyret hjælpemotor til kørestole, der forbedrer arbejdsmiljøet og sikrer trygge forhold.

Ved brug af en EasyGo Rehab Standard-motor mindskes gentagne træk, skub og slæb med manuelle kørestole, der kan føre til en øget risiko for arbejdsskader i skuldrer og ryg, men også en ulykkesrisiko for at blive klemt, påkørt eller falde.

EasyGo Rehab Standard bliver hovedsageligt benyttet til standard transportstole, der kan klappes sammen eller fastramme stole. Motoren kan uden besvær på- og afmonteres uden brug af værktøj.

Dette betyder også, at motoren nemt kan flyttes mellem flere forskellige stole, vha. fastmonterede beslag på stolens ramme. Hjælpemotoren giver øget fleksibilitet og mobilitet til brugeren, mens den aflaster ledsageren.

Motoren styres med en speederboks, som monteres på transportstolens håndtag. Under kørsel følger EasyGo Rehab Standard underlaget, også på brosten, skæve fliser og fast grus. Motoren kan hæves og sænkes fra underlaget, mens den er monteret.

Serien er med punkterfrie dæk, tør batterier og fugtsikret oplader.

EasyGo Rehab Standard # 202001, HMI # 100988

Mål	H: 250 mm, B: 300 mm, L: 520 mm	Motorkraft	150 W
Vægt	19 kg	Kørelængde pr. opladning	Op til 12 km
Batterier	12 V 2 x 12 Amph / 2 x 20 Amph	Hastighed	0 - 4 km/t, 0 - 6 km/t
Lader - ladetid	24 V 2 Amp - 5 timer	Stigningskapacitet v. 80 kg	12%, 7°

IMMO A/S


Friis Hansens Vej 9 - DK-7100 Vejle
+45 7585 8022
hello@immodenmark.dk
immodenmark.dk

IMMO  KEEP MOVING



EASYGO REHAB PLUS

EasyGo Rehab Plus trækker stolen fremad, hvilket forlænger dens levetid og forbedrer arbejdsmiljøet.

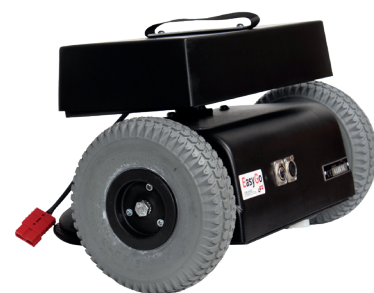

EasyGo Rehab Plus er en ledsagerstyret hjælpemotor, der sikrer trygge forhold for brede, tunge stole og bariatriske brugere.

EasyGo Rehab Plus er udviklet og produceret til at kunne øge brugerens fleksibilitet, samt forbedre arbejdsmiljøet for ledsageren. Motoren kan tilpasses til mange forskellige fabrikater af stole og påmonteres på kørestole med en sædebredde over 55 cm målt mellem armlænene. Efter montering kan ledsageren ubesværet regulere hastigheden med betjeningsenheden på styrehåndtaget.

Under kørsel trækker motorens egne hjul på underlaget. Vha. differentiale kan EasyGo Rehab Plus dreje skarpt uanset personvægt. Motoren kan med fordel benyttes til bariatriske brugere med en vægt op til 300 kg.

EasyGo Rehab Plus kører på egne hjul, hvilket sikrer et godt greb i underlaget. Under brug bærer hjælpemotoren sin egen vægt, og skal ikke regnes med i kørestolens bæreevne.

Serien er med punkterfrie dæk, tør-batterier og fugtsikret oplader.

EasyGo Rehab Plus # 202014, HMI # 36928

Mål	H: 300 mm, B: 500 mm, L: 240 mm	Motorkraft	300 W
Vægt	32 kg	Kørelængde pr. opladning	Op til 10 km
Batterier	20 Amph	Hastighed	0 - 6,5 km/t
Lader - ladetid	24 V, 2,5 Amp - 8 timer	Stigningskapacitet v. 80 kg	12%, 7°

IMMO A/S


Friis Hansens Vej 9 - DK-7100 Vejle
+45 7585 8022
hello@immodenmark.dk
immodenmark.dk

IMMO  KEEP MOVING



EASYGO REHAB LOW

Hjælpeomotor til lave og smalle komfortstole øger mobiliteten og fleksibiliteten hos bruger, og aflaster ledsager.

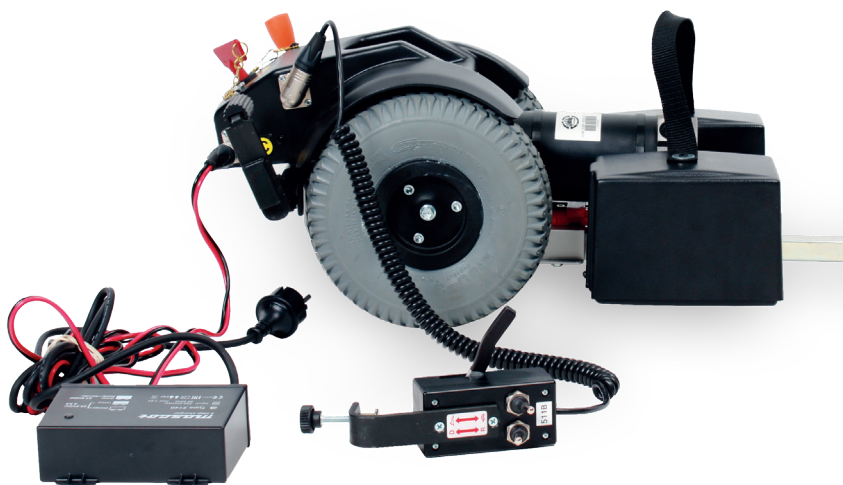

EasyGo Rehab Low er en ekstra lav ledsagerbetjent hjælpemotor til komfortstole.

Motoren er specialudviklet og produceret til at passe på kørestole, hvor pladsen under sædet er trang. EasyGo Rehab Low ligger vandret over gulvet og er derfor ideel, hvis stolen har sædekup bagtil. Dette ses ofte hos ældre komfortstole.

Med en styreboks, der er monteret på skubbehåndtaget, kan ledsageren uden besvær starte/stoppe motoren, styre retning og regulere hastighed. Ved at løfte på fodpedalen sænkes motoren, hvorefter

man er klar til kørsel. Under kørsel følger EasyGo Rehab Low underlag såsom brosten, skæve fliser og grus.

Motoren øger brugerens fleksibilitet og mobilitet, og aflaster ledsageren, som slipper for træk, skub og slæb. Gentagne træk, skub og slæb kan føre til arbejdsskader i muskler og led, men også ulykkesrisici for at blive klemt eller falde. Slippes håndtaget stopper motoren øjeblikkeligt.

Serien er med punkterfrie dæk, tør batterier og fugtsikret oplader.

EasyGo Rehab Light # 202013, HMI # 35186			
Mål	H: 310 mm, B: 300 mm, L: 520 mm	Motorkraft	150 W
Vægt	18,5 kg	Kørelængde pr. opladning	Op til 10 km
Batterier	12 Amph	Hastighed	0 - 4 km/t, 0 - 6 km/t
Lader - ladetid	24 V 2,5 Amph - 5 timer	Stigningskapacitet v. 80 kg	12%



EASYGO REHAB LIGHT

En manuel kørestol kan være besværlig at manøvrere sikkert og trygt rundt i en travl dagligdag.



EasyGo Rehab Light er en mindre ledsagerstyret hjælpe-motor, der er udviklet til kørestole, hvor pladsen er trang. Den kan benyttes på stole op til 48 cm.

På en styreboks, der er monteret på skubbehåndtaget, kan ledsageren uden besvær starte og slukke motoren, styre retning og regulere hastighed.

Ved at hæve fodpedalen sænkes motoren, hvorefter man er klar til kørsel. Under kørsel følger EasyGo Rehab Light underlag såsom brosten, skæve fliser og fast grus. Motoren øger brugerens

fleksibilitet og mobilitet, og aflaster ledsageren, som slipper for at trække, skubbe og slæbe. Risikoen for arbejdsskader og overbelastning af muskler og led mindses, men også ulykkesrisici for at blive klemt eller falde.

Motoren er let at på- og afmontere uden brug af værktøj, hvorefter stolen og motoren nemt kan transporteres. Der findes forskellige aftagelige batteripakker, som udvælges efter stolens opbygning. Motoren kan også anvendes til nyere fastrammestole.


Serien er med punkterfrie dæk, tør-batterier og fugtsikret oplader.

EasyGo Rehab Light # 202013, HMI # 35186			
Mål	H: 310 mm, B: 300 mm, L: 520 mm	Motorkraft	150 W
Vægt	18,5 kg	Kørelængde pr. opladning	Op til 10 km
Batterier	12 Amph	Hastighed	0 - 4 km/t, 0 - 6 km/t
Lader - ladetid	24 V 2,5 Amph - 5 timer	Stigningskapacitet v. 80 kg	12%



EASYGO REHAB HOLIDAY

En manuel transportstol med EasyGo Rehab Holiday ledsagerstyret elmotor påmonteret sikrer en fleksibel og tryk tur eller ferie for brugeren og ledsageren.

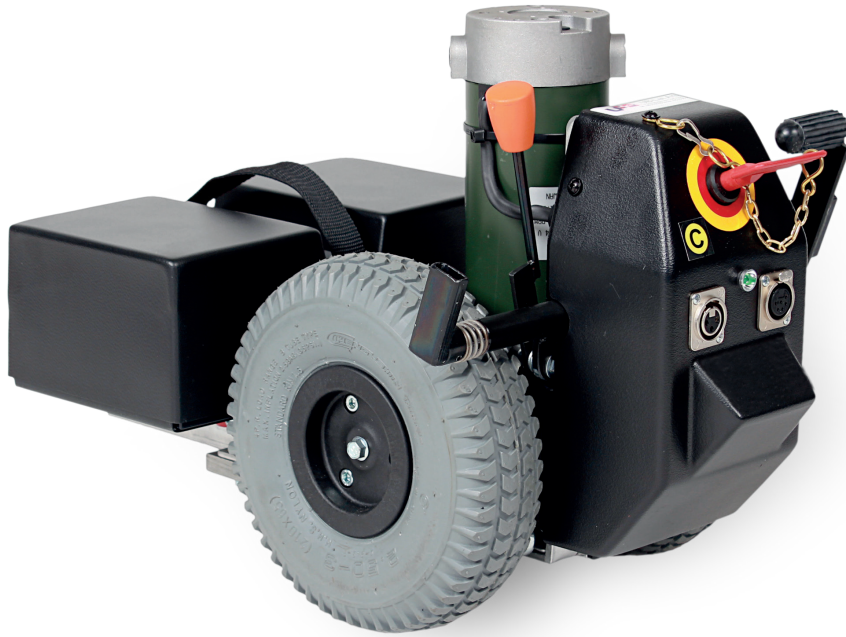

EasyGo Rehab Holiday er en ledsagerstyret hjælpemotor, der giver øget fleksibilitet og mobilitet til brugeren, og samtidig afhjælper ledsageren under ture og ferier.

Motoren er nem at håndtere idet batteripakken uden besvær kan skilles fra motoren ved at løfte i stroppen over pakken. Batterierne vejer ca. 4 kg pr. stk., og motoren vejer ca. 10 kg. Man kan spare 2 kg ved at vælge luftdæk fremfor punkterfrie dæk.

EasyGo Rehab Holiday er udviklet til transportstole med en sædebredde ned til 36 cm. Den smalle opbygning gør det muligt uden besvær at pakke transportstolen og motoren sammen i f.eks. en bil og køre afsted.

Under kørsel følger Holiday underlag såsom brosten, skæve fliser og grus. Motoren aflaster ledsageren, da man slipper for at trække, skubbe og slæbe, hvilket kan føre til arbejdsskader i muskler og led, men også ulykkesrisici for at blive klemt, påkørt eller falde.

EasyGo Rehab Holiday # 202002, HMI # 103111

Mål	H: 250 mm, B: 300 mm, L: 520 mm	Kørelængde pr. opladning	Op til 8 km
Vægt	18 kg	Hastighed	0 - 5 km/t, 0 - 6,5 km/t
Batterier	2 x 12 Amph	Stigningskapacitet v. 80 kg	12%, 7°
Lader - ladetid	24 V 2,5 Amph - 5 timer	Pris, ekskl. moms	Kr. 17.095,-
Motorkraft	150 W		

IMMO A/S

Friis Hansens Vej 9 - DK-7100 Vejle
+45 7585 8022
hello@immodenmark.dk
immodenmark.dk

IMMO  KEEP MOVING



EASYGO REHAB SOLO

En brugerstyret hjælpemotor til manuelle kørestole giver forbedret selvstændighed samt bevægelighed.



Oplev øget mobilitet og fleksibilitet ved brug af en brugerstyret Rehab Solo hjælpemotor til kørestole.

EasyGo Rehab Solo hjælpemotor styres af brugeren selv ved hjælp af et joystick, der fastmonteres på kørestolens armlæn let tilgængeligt. Løsningen giver brugeren øget selvstændighed samt fri bevægelighed. Der kan suppleres med en ledsagerstyring, som monteres på kørestolens håndtag, hvorved gentagne skub og træk mindskes for både bruger og ledsager, og dermed mindsker risikoen for skader på led og muskler.

Motoren passer til manuelle stole og kan på- og afmonteres uden brug af værktøj. EasyGo Solo kan benyttes til flere kørestole på skift, hvorpå der er påsat monteringsbeslag.

Under kørsel følger motoren underlaget og kan trække på brosten, skæve fliser og fast grus.

Hvor pladsen er trang, kan EasyGo Solo dreje om sin egen akse.

Serien er med punkterfrie dæk, tør batterier og fugtsikret oplader.

EasyGo Rehab Solo # 202021, HMI # 47555

Mål	H: 330 mm, B: 490 mm, L: 240 mm	Motorkraft	150 W
Vægt	30 kg	Kørelængde pr. opladning	Op til 10 km
Batterier	12 V 2 x 20 Amph	Hastighed	0 - 6 km/t
Lader - ladetid	24 V 2,5 Amp - 5 timer	Stigningskapacitet v. 80 kg	6%

IMMO A/S
Friis Hansens Vej 9 - DK-7100 Vejle
+45 7585 8022
hello@immodenmark.dk
immodenmark.dk

IMMO  **KEEP MOVING**